




# Finexel

All in One Fractional CO2 Laser

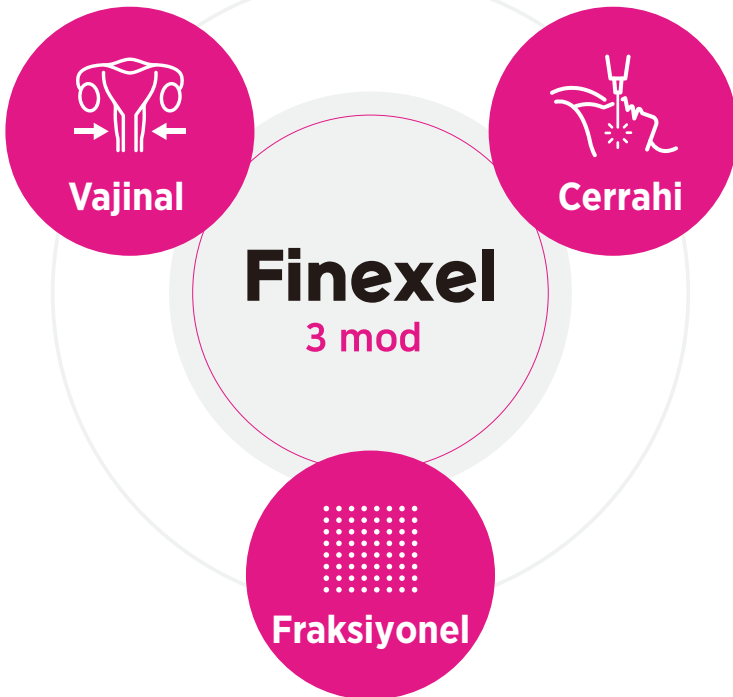

## CO2 lazer için 20 yılı aşkın süredir gösterdiğimiz özverili çabalarımızla, birinci sınıf CO2 lazer performansı sunuyoruz.

Mükemmel hassasiyete sahip bu lazer ile tedaviler daha kolay ve daha hızlı.

Finexel'in yüksek gücü ve dengeli enerjisi, tedavi sırasında hasta konforunu artırır ve optimum sonuçlar elde etmenizi sağlamanın yanı sıra çalışma süresini kısaltır ve yara izi riskini en aza indirir




## Avantajları

- 1 Yüksek gerilim transformatörü ve yüksek enerji tüpü sayesinde 300 W azami güç ve dengeli enerji dağılımı.
- 2 Düzgün ve doğru lazer ışını deseni.
- 3 Elektrikli sürücü (kart), yüksek gerilim transformatörü ve lazer tüpü gibi mükemmel bir donanım kombinasyonu sayesinde istikrarlı ve yüksek kaliteli atışlar ve dengeli, yüksek performans.
- 4 1- 990 HZ arasında atış yapma imkanı.
- 5 Yüksek performanslı Ultra puls ile dokuda yara oluşmaz.
- 6 Kullanımı basit kullanıcı arayüzü.
- 7 Yüksek teknoloji ve kanıtlanmış etkinlik; 20 yılı aşkın bir süredir pazarda uzun dönem satışlarla zorlu pazar testini geçmiş olup, günümüzde çoğu büyük hastane ve kliniklerde kullanılmaktadır.

# Finexel size 3 mod sunar.


**Finexel FRX+Cerrahi**

**Finexel Evero Vajinal+FRX+Cerrahi**

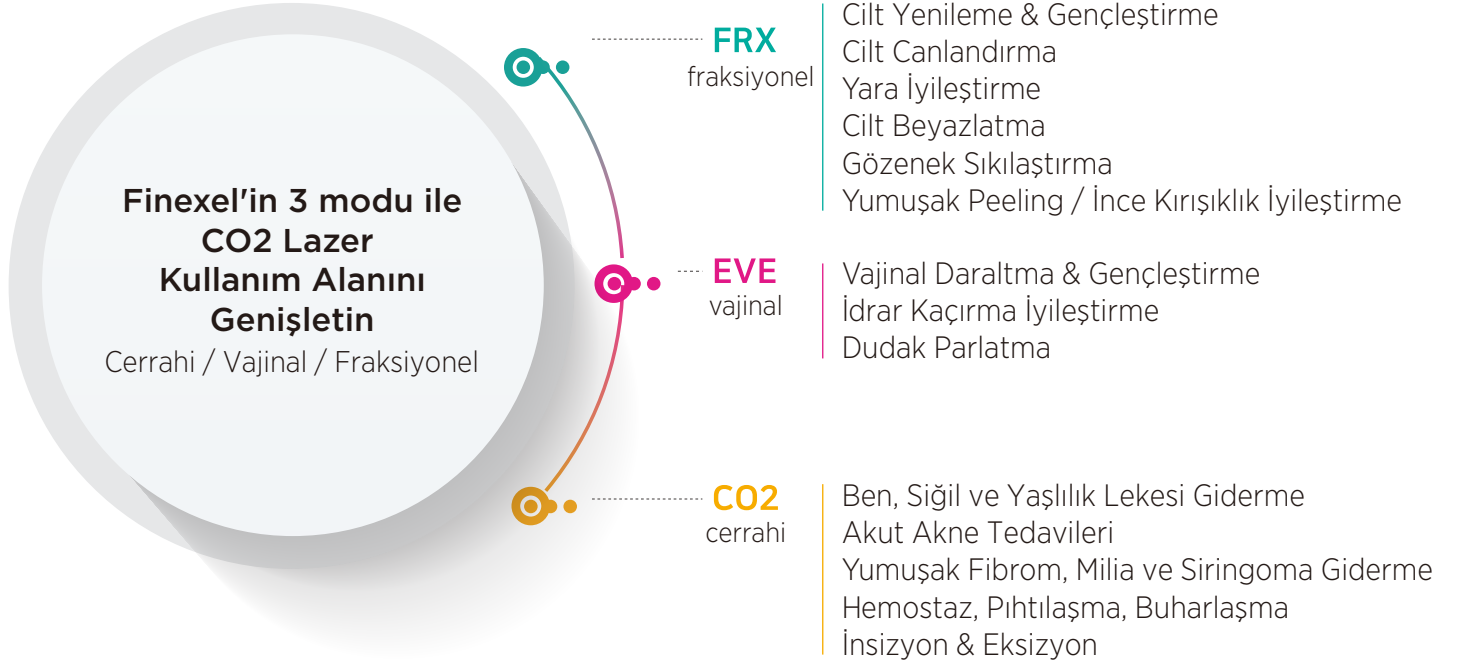

## Cerrahi

**Finexel'in olağanüstü yüksek azami gücü, güvenli ve etkili bir CO2 tedavisi sunar.**

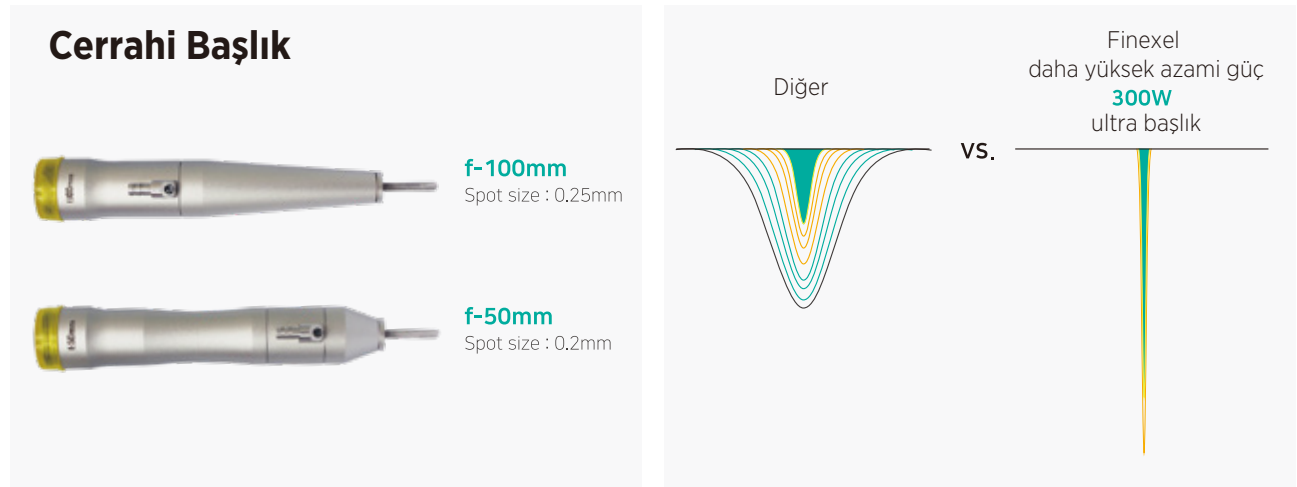

Finexel, Ultra Pulse ile 300 W civarında yüksek azami güçte ışın verir. Bitişik dokulardaki termal hasarı en aza indirir, böylece ağrıyı azaltır ve hastalar daha hızlı iyileşir

# Fraksiyonel

## Finexel Fraksiyonel Modunun Nokta Boyutu 80 $\mu$ m'dir

Cilde minimum boyutta ve aynı kalitede daha odaklı bir lazer ışını gönderir. Böylece hızlı bir iyileşme ve daha az ağrı deneyimlenmesini sağlar ve diğerlerinden daha hızlı bir optimal FRX etkisi yaratır.


Min. Size  
80  $\mu$ m

## Çeşitli Tarama Türleri


Çeşitli tarama türleri, yoğunluk ve boyut ayarı işlevleri, geniş bir tedavi yelpazesinde en iyi sonucu sağlar.



kare

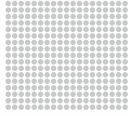

dikdörtgen

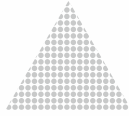

üçgen



daire



standart



alternatif



rastgele



dağılım

## Önerilen Parametreler için Güvenilir Önceden Ayarlanmış Program

Birkaç önemli doktorla yürütülen uzun vadeli klinik testler, minimum yara izi riski, güvenli tedavi ve olağanüstü sonuçlar için bu parametreyi önerir.

### Hafıza

1

2

3

4

5

Kaydet




# Vajinal

## Tüm vajinal duvar tabakasının CO2 lazer ile termal stimülasyonu


Tüm vajinal duvar tabakasının CO2 lazer termal stimülasyonu.

**EVERO**  
VAGINAL REMODELING LASER

Evera Başlık seti

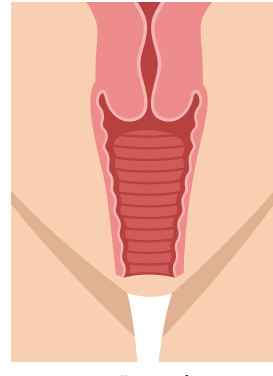

öncesi

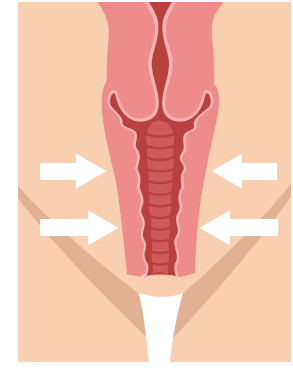

sonrası


90 veya 360 seçebilirsiniz

Evero vajinal daraltmada tüm yönleriyle beklentilerinizi karşılar.

Tip	Ameliyat	Dolgu	Lazer
Yöntem	Kes ve Dik	Enjeksiyon	Emisyon
Süre	60 dakika	30 dakika	10-15 dakika
Ağrı Seviyesi	Yüksek	Orta	Yok
Etki	6 hafta sonra	2-3 hafta sonra	3-5 gün sonra
Dezavantaj	Mesane Kanama Lotunda Enjeksiyon Perforasyonu	Kısa Etkililik Süresi	Yok
Hastaneye Yatış	1-2 hafta sonra	Gerekli değil	Gerekli değil




Lazer tedavisi ile kolajen uyarımının etkisi

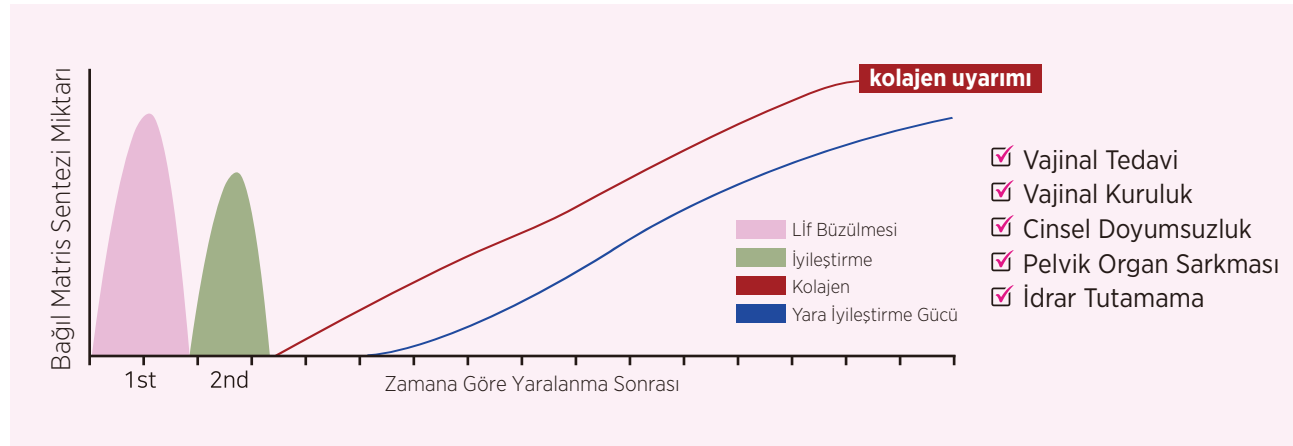

## Tedavi Süreci


bir ay aralıkla 3 seans

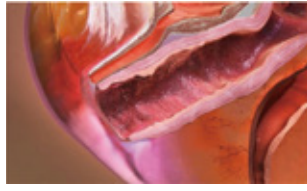


**01** tedaviden önce vajina iç duvarını gevşetin



**02** Lazer kılavuzu yerleştirin.

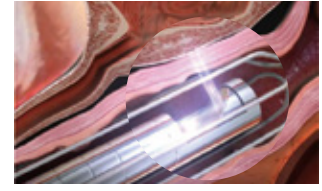


**03** Ayna (lens) lazer ışınlaması

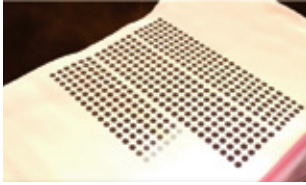

tek tip lazer ışını ile dakika deliği oluşumu



**05** 1-2 geçişle tekrarlayın

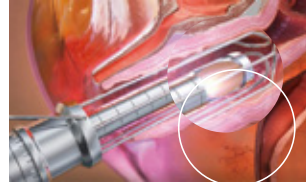

**06** 1 seans 10-15 dakika




**07** tedavi sonrası esnek ve nemli vajina iç duvarı

Lazer termal etkileri ile vajinayı sıkılaştırır ve tedavilerden sonra vajinal yapıyı değiştirerek ciltte kollajen oluşumunu uyarır ve tüm koşulları iyileştirir. Bazı çiftlere ve cinsel işlev bozukluğu olan kadınlara yardımcı olabilir ve daha sağlıklı bir vajina oluşturabilir.

## Bakteri azaltma

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon etkisi ile enflamasyon tedavisi


vajinit  vulva kaşıntısı  lökore

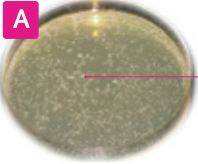

**A**

Önce

Zararlı bakteri

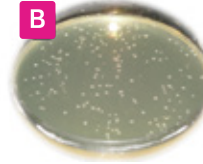

**B**

Sonra

Tıpkı ağız sağlığı için düzenli diş taşı temizliği gibi, vajinal sağlık için düzenli Evero tedavisi!

## Parlak Cilt ve Daha Kaliteli bir Yaşam için Mükemmel Seçim


### CO2 Cerrahi Mod Klinik Sonuçları

siğil

Fotoğraflar Dr. Lee Wook'un izniyle

Konjenital Melanositik Nevus

Fotoğraflar Dr. Lee Wook'un izniyle

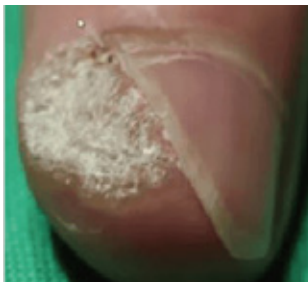

ÖNCE



SONRA



ÖNCE




SONRA

### CO2 Cerrahi Mod Klinik Sonuçları


Fotoğraflar K.P. Song'un izniyle



ÖNCE

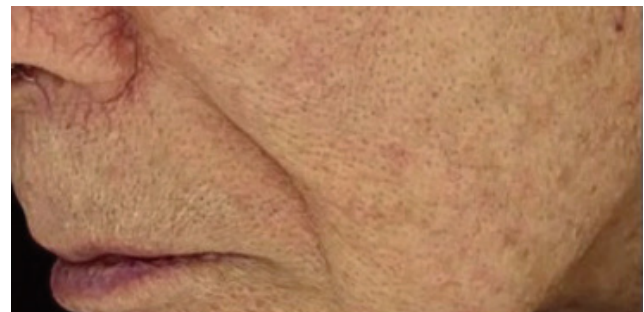

SONRA

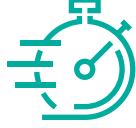

Kısa  
İyileşme  
Süresi



Daha Az Ağrı,  
Daha Az Perilezyonel  
Termal Hasar



Yarasız  
Hassas CO2  
Cerrahisi

## 300 W Yüksek Azami Güç 80 um Küçük Işın Boyutu

Hızlı Pıhtılaşma



Kullanımı Kolay,  
Bakımı Basit



Yüksek  
Hassasiyet



### Teknik Özellikler

<b>Dalga Boyu</b>	10,600nm
<b>Sistem</b>	Fraksiyonel CO2 Lazer
<b>Mod</b>	FRX(fraksiyonel) / CO2 (cerrahi) /Evero (vajinal)
<b>Maks Güç</b>	30W/40W
<b>Piksel Enerjisi</b>	5~300mJ
<b>Tarama Alanı</b>	1x1~20x20mm
<b>Yoğunluk</b>	0,1~2,0mm
<b>Üst üste gelme</b>	1~10
<b>Lazer şekli</b>	Kare-Dikdörtgen-Üçgen-Daire
<b>Işın deseni</b>	Standart-Alternatif-Rastgele-Dağılım
<b>Elektriksel</b>	100~240V, 50/60Hz
<b>Boyut</b>	350(W) x 400(L) x 1000(H) mm
<b>Ağırlık</b>	50kg (Max. Weight: 60kg)

# Finexel

All in One Fractional CO2 Laser

SNJ, tıbbi ve estetik cihazlar üreten ve tedarik eden bir şirkettir.

SNJ, 1998 yılında kurulup 1999 yılında tıbbi cihaz üretim lisansı aldıktan sonra, Kore'de tıbbi lazer ekipmanı geliştirmeye, üretmeye ve satmaya başlamıştır. Günümüzde ürünlerimizi 20'den fazla yabancı ülkeye ihraç ediyoruz.

24 yılı aşkın bir süredir Ultra-Pulse teknolojisi araştırmalarına odaklanarak, Kore'de beklenen bir CO2 lazer teknolojisi ve kalitesi geliştirdik ve bu teknoloji, yalnızca Kore'de değil, denizaşırı ülkelerde de büyük hastaneler ve doktorlar arasında iyi bir ün kazanmıştır.

2022 yılında yepyeni ve oldukça nadir konsept bir lazer sistemi olan "Q-Switched ve Long-Pulsed Nd:YAG Lazer", "üç dalga boyu diyot lazer" Seliah Tri'yi piyasaya sürdük. Lazer tedavisi veya diğer medikal cilt tedavileri gibi uygulamalar ve bunların tamamlayıcı etkileri sonrasında cildin yeniden dengesine kavuşmasına yardımcı olmak için, 2021'de bir estetik seri olan este7 (1 sistemde 7 fonksiyon - temel cilt bakımı) ve Du:Pla (Neon ve Argon Plazma cihazı)'yı piyasaya sürdük. İstikrarlı ve Sürekli olarak iyi performans sunarak en iyi sonuçları sağlıyoruz ve ayrıca KFDA, CE MDD, FDA, vb. gibi çeşitli sertifikalara sahibiz.

Cihaz geliştirme deneyimimize ve üretime dayalı bilgi birikimimize dayanarak, şimdi çabalarımızı klinik araştırma ve temel teknoloji Ar-Ge'ye odaklıyoruz. yeni tıbbi ve etik çözümler sunan küçük ama güçlü bir küresel şirket olmak için istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz.



#608, Ace-Techno Tower 2, Digital-ro 31-gil 19,  
Guro-gu, Seoul, Korea 08381

**Tel:** +82-2-866-9005 **Fax:** +82-70-8622-9009

**E-mail:** overseas@medicalsnoj.com

**Web:** www.medicalsnoj.com



Etiler Mah, Mürselpaşa Blv. No: 22/52 Konak/İzmir

**Tel:** 0 (232) 445 45 49 **Fax:** 0 (232) 448 48 02

**E-mail:** info@noramedikal.com.tr

**Web:** www.noramedikal.com.tr

SNJ Türkiye Distribütörü