



coaxmed®

YÜZ VE VÜCUT İŞLEMLERİ İÇİN KOMPLE BİR ESTETİK ÇÖZÜM



SADECE
25 DAKİKA

YÜKSEK ENERJİ,
MAKSİMUM ETKİ


YÜKSEK
GÜVENLİK

MİNİMUM MALİYET
MAKSİMUM ETKİ

TEK SEANSTA
%20 İLA %30
SONUÇ


MADE IN ITALY

YÜZ VE VÜCUT TEKNOLOJİLERİNİ TEK PLATFORMDA BİRLEŞTİREN **COAXMED** İLE TANIŞIN...

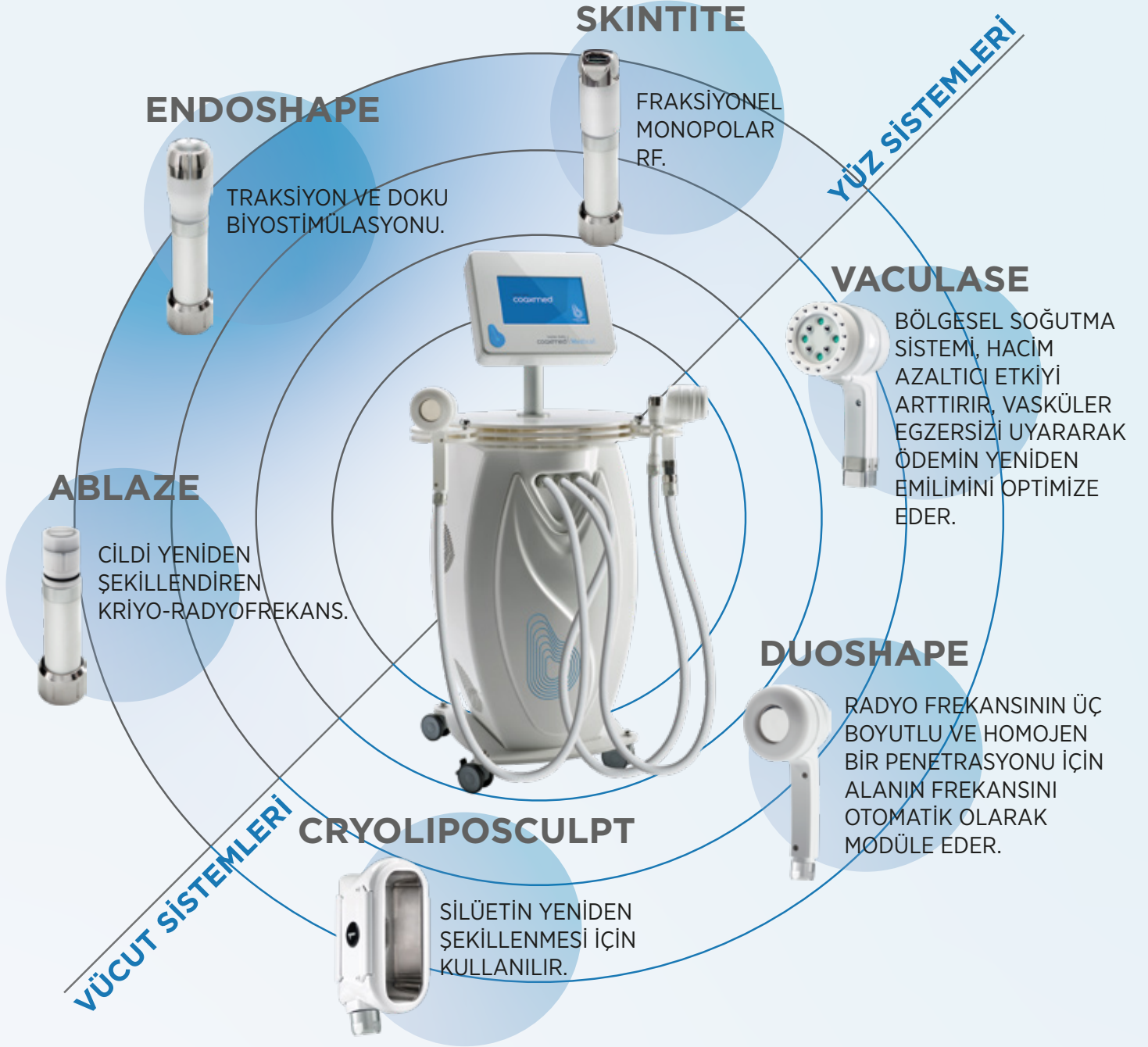

MALİYETİ MİNİMİZE EDERKEN, YATIRIMI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN.

COAXMED estetik sonuçların kalitesinde inanılmaz bir artışın anahtarı olan çeşitli teknolojileri birleştiren benzersiz bir teknolojik yeniliktir.

Eskime, teknolojiye en büyük sorunlardan biridir. En yeni ekipman parçasını satın alma ihtiyacı, dünya çapında doktorların devamlı şikayetidir.

COAXMED geliştirilmek üzere tasarlanmıştır. Yeni bir model satın almaya gerek kalmadan pazardaki en son yeniliklere ve teknolojilere yükseltilebilen geliştirilebilir bir platformdur.




CRYOLIPOSCULPT

- Bölgesel İncelme




VACULASE

- Selülit
- Lenf Drenaj
- Popo Şekillendirme/Kaldırma

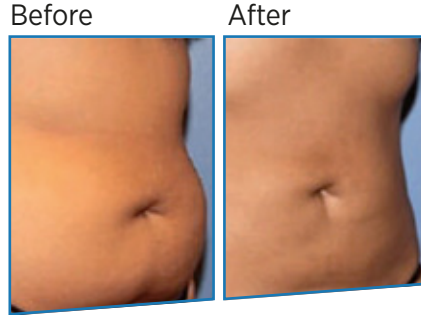

DUOSHAPE

- Fazla Yağ
- Cilt Sıkılaştırma
- Vücut Yumuşatma
- Liposuction Öncesi/Sonrası

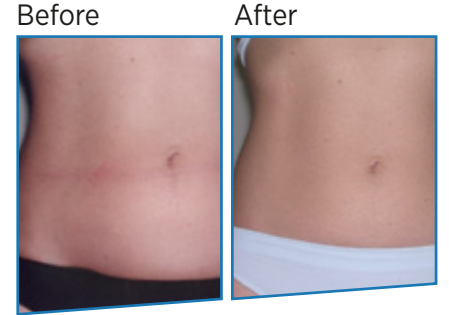


ABLAZE

- Yüzeysel ve Derin Kırışıklıklar
- Kolojen Stimilasyonu



ENDOSHAPE

- Yüzeysel ve Derin Kırışıklıklar
- Kolojen Stimilasyonu

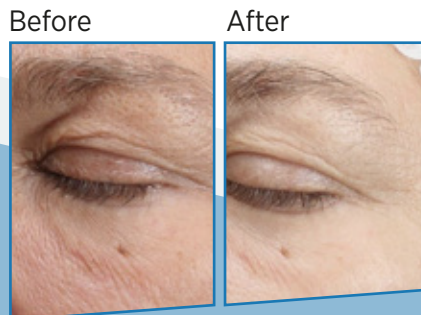

SKINTITE

- Yüzeysel ve Derin Kırışıklıklar
- Genişlemiş Gözenekler
- Siville İzleri
- Deri Çatlağı



FLEXI® ÇOKLU TEKNOLOJİ

DUOSHAPÉ®

- **3Density®** Termal enerjinin ciltteki penetrasyon derinliğini 200 kHz'den 600 kHz'e deęiřtirmek için alan frekansını otomatik olarak modüle
- Kavitasyon etkisi sayesinde yağ hücreleri zarar veren yüksek yoğunluklu radyofrekans ve yüksek güçlü 28 kHz ultrason jeneratörünün özel eşzamanlı emisyonu.
- **PerfectTune** teknolojisi, stabiliteyi koruyan ve etkinliği garanti eden aktif su akışıyla ultrason çevirgecini soęutur.

VACULASE®

- **Asama 1: Derin Lazer Stimülasyonu**
Lazer diyotları arteriyel, venöz ve lenfatik mikro dolaşımı yeniden etkinleştirir ve güçlendirir, intradermal damarların anjiyogenezini teşvik eder. Lazer ışığı enerjisinin fibroblast aktivitesi üzerinde de faydalı etkileri vardır.
- **2. Asama: Lokalize Soęutma**
Lokalize soęutma sistemi, vasküler egzersizi uyararak ödemin yeniden emilimini optimize ederek hacim azaltıcı etkiyi artırır.
- **Asama3: Lipomasaj**
Ritmik aspirasyon masajı, lenf-drenaj ve doku stimülasyon süreçlerini uyarır, cildin normal kollajen elastik gerginliğinin restorasyonunu artırır.

SKINTITE®

- Dermal koagülasyonu teşvik etmek için ritmik vakum, mikroıęneleme ve radyofrekans kombinasyonu.
- Kolajen sıkılařtırma ve sentez oluřturan her bir mikroıęne ucunun etrafında derin dermisi 360 derece ısıtır.
- 0.25 mm ila 2.5 mm uzunlukta steril tek kullanımlık çok ięneli elektrot.

ABLAZE®

- **Cooltec:** El aletinin ucunu soęutarak cilt yüzeyini aşırı ısınmadan korur.
- **3Density:** Derideki termal enerjinin penetrasyon derinliğini 300kHz'den 1mHz'ye çeřitlendirmek için alan frekansını otomatik olarak modüle eder.
- **Propatch:** Tek kullanımlık, atılabilir, salin jel yaması, yüzeysel kabarcık riskini ortadan kaldırarak tek tip termal emisyon sağlar.
- **EndoShape:** RF enerjisinin penetrasyonunu kolaylařtıran ayarlanabilir ritmik emme ile hücrelerin stimülasyonu.

Ablaze®: Cildi güvenle yeniden řekillendiren kriyo-radyo frekansı.

3Density®: Cildin yařlanmasını önlemeye yönelik üç boyutlu yaklaşım.

EndoShape®: Gerilme ve doku biyostimülasyonu.

CRYOLIPOSCULPT

coaxmed
VÜCUT BAŞLIKLARI



Silüetin yeniden şekillenmesi için **Cryoliposculpt®**.
TissueActive® Dokunun damarlanmasını korur.
Coolfrequency®, hücre içi ve hücre dışı iyon değişimini uyarır ve tedavi edilen dokuda “buz bloğu” etkisinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.
Vacupulse®: Hareket kabiliyetini korurken ve mikrosirkülasyonu uyarırken dokuların ayrılmasına neden olan ve direnç ve elastikiyetini değiştiren aktif emiş.

DUOSHAPE

3Density®, radyo frekansının üç boyutlu ve homojen bir penetrasyonu için alanın frekansını otomatik olarak modüle eder. Dönüştürücünün su soğutmalı ve 28 kHz’de kararlı ultrason frekanslı **PerfectTune®**.



VACULASE



Vaculase®

Lazer 810 nm’de: ısı, arteryel,

venöz ve lenfatik mikrosirkülasyonu yeniden etkinleştirir ve güçlendirir ve intradermal damarların neoanjyogenezini destekler; ışık enerjisi fibroblastlara etki eder.

Cryo: Lokalize soğutma ödemi azaltır, sıvı geri emilimini optimize eder, vasküler aktiviteyi uyarır.

Ritim vakumu: endodermal masaj, yağ dokusunun metabolik reaktivasyonunu teşvik ederek kan dolaşımını ve lenfatik drenajı iyileştirir.



- Ablaze®:** Cildi güvenle yeniden şekillendiren kriyo-radyofrekans. **Cooltec®**, el aletinin kafasını soğutur ve cilt yüzeyini korur. **3Density®** alan frekansını modüle ederek radyo frekansının üç boyutlu ve hatta nüfuz etmesini sağlar.
- Propatch:** Tek kullanımlık salin jelden yapılmıştır, yanık risklerini ortadan kaldırarak radyo frekansı emisyonunda sterilite ve homojenliği garanti eder.



ENDOSHAPE



EndoShape®:

Traksiyon ve doku biyostimülasyonu. Ritmik emme ve radyofrekansın sinerjik etkisi; kan akışını ve lenfatik drenajı artırır, dokuları canlandırır ve selülit ve cilt gevşekliğine etki eder.

SKINTITE

- SkinTite®:** Fraksiyonel monopolar RF. Sarkan cildi sıkılaştırmak için ritmik emiş 0,25 mm ila 2,5 mm arasında değişen derinliklerde etki eden tek kullanımlık, sterilize elektrot.



coaxmed

TEKNİK VERİLER

BESLENME VOLTAJI	240 Vac 50/60 Hz
MAKS. GÜÇ	450 VA
SİGORTALAR	2 x F4A 250 V
MAKS. VAKUM	66.6 kPa
MINİMUM DONDURUCU SICAKLIĞI	-10°
SINIF VE TİP	I BF
93/42 / EEC RİSK SINIFLANDIRMASI	IIb
BOYUTLARS	680 x 470 x 1400 mm
APLİKATÖRLERLE MAKS. AĞIRLIK	63 kg

ULTRASON

FREKANS	28 kHz
MAKS. GÜÇ	35 W
ÇALIŞMA MODU	Devamlı ve Atımlı
AKTİVASYON	Ayak

VACULASE

N° OF DIODE LASER	4
DALGA BOYU	8 nm ± 5
OUTPUT POWER CW PER DIODE	1W

EMME İLE KRİYOLİPOLİZ

MINIMUM TEMPERATURE	-10°C
MAX SUCTION	66.6 kPa
ÇALIŞMA MODU	Dokunmatik
AKTİVASYON	Ekran Düğmesi

YÜZ RADYOFREKANSI

FONKSİYON	Çift Kutuplu/Tek Kutuplu
FREKANS	300 kHz'den 1000 kHz'ye
DALGA BOYU	Genlik modülasyonlu sinyal
MAKS. GÜÇ	100 W
ÇALIŞMA MODU	Devamlı ve Atımlı
AKTİVASYON	Ayak

VÜCUT RADYOFREKANSI

FONKSİYON	Çift Kutuplu/Tek Kutuplu
FREKANS	300 kHz'den to 1000 kHz'ye
DALGA BOYU	Genlik modülasyonlu sinyal
MAKS. GÜÇ	130 W
ÇALIŞMA MODU	Devamlı ve Atımlı
AKTİVASYON	Ayak Pedalı

APLİKATÖRLER

VÜCUT SİSTEMLERİ



CRYOLIPOSCULPT



VACULASE



DUOSHAPÉ

YÜZ SİSTEMLERİ



ABLAZE



ENDOSHAPÉ



SKINTITE

Coaxmed %100 İtalya'da üretilmiştir. Biotec Italia, orjinal bir ürünün gerçekliğini ve üretim sürecinin her bir detayına gösterilen sonsuz dikkat sebebiyle ürünlerinin üstün kalitesini garanti eder.

Biotec Italia şunları garanti eder;
Tamamen İtalya'da üretilmiştir.

Sadece İtalyan yan mamülleri kullanılarak üretilmiştir.

En yüksek kalitedeki malzemelerle üretilmiştir.

Biotec Italia'nın kendi teknolojik tasarımları kullanılarak üretilmiştir.

nora[®]
MEDİKAL ESTETİK KOZMETİK

MADE IN ITALY

ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



CE 1370



Etiler Mah. Mürselpaşa Bulvarı No: 22/52 Konak/İzmir

Tel: 0232 445 45 49

Fax: 0232 448 48 02

info@noramedikal.com.tr

www.noramedikal.com.tr

YouTube Instagram Facebook LinkedIn /noramedikal