


# Finexel

All in One Fractional CO2 Laser

snj  
MEDICAL & AESTHETIC  
SOLUTIONS

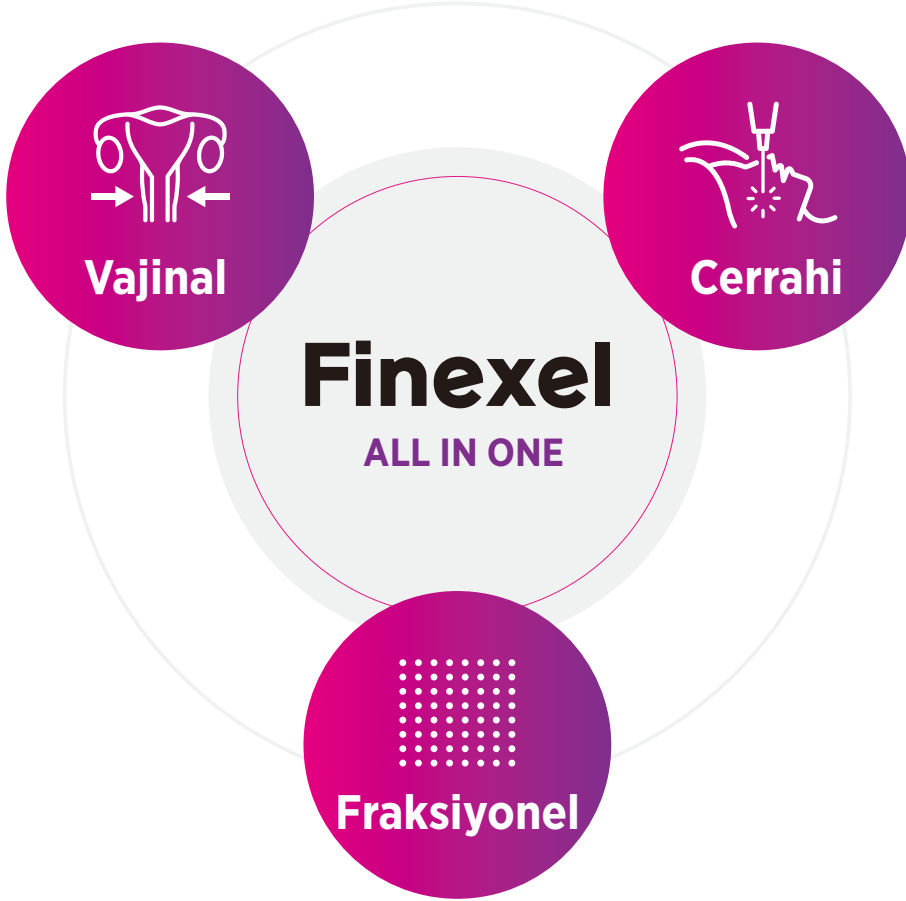

FDA

nora®  
MEDİKAL ESTETİK KOZMETİK

Finexel; jinekolojik, dermatolojik ve cerrahi uygulamalarda maksimum sonucu elde etmek için enerjiyi hedeflenen bölgeye stabil ve kusursuz bir şekilde gönderen Fraksiyonel CO2 Lazer sistemidir.

Finexel'in yüksek gücü ve dengeli enerjisi, tedavi sırasında danışanın konforunu artırır ve kullanıcının optimum sonuçlar elde etmesini sağlar.

Kullanımı oldukça basit ve ergonomik arayüzü ile güvenli ve etkili bir CO2 tedavisini sizlere sunar.

## Avantajları

- Yüksek gerilim transformatörü ve yüksek enerji tüpü sayesinde 300W azami güç ve dengeli enerji dağılımı.
- Homojen ve stabil lazer ışın profili.
- Elektrikli sürücü (kart), yüksek gerilim transformatörü ve lazer tüpü gibi mükemmel bir donanım kombinasyonu sayesinde istikrarlı ve yüksek kaliteli atışlar ve dengeli, yüksek performans.
- 1-990 HZ arasında atış yapma imkanı.
- Yüksek performanslı Ultra Pulse modu ile sağlıklı dokuda hasar oluşturmadan hızlı iyileşme süreleri ile güvenli tedavi imkanı sunar.
- Kullanımı basit kullanıcı arayüzü.



# Finexel Size 3 Mod Sunar

Finexel'in 3 modu ile  
CO2 Lazer  
Kullanım Alanını  
Genişletin

Cerrahi / Vajinal / Fraksiyonel

**FRX**  
Fraksiyonel

Cilt Yenileme & Gençleştirme  
Cilt Canlandırma  
Yara İyileştirme  
Cilt Beyazlatma  
Gözenek Sıkılaştırma  
Yumuşak Peeling, İnce Kırışıklık İyileştirme

**EVE**  
Vajinal

Vajinal Daraltma & Gençleştirme  
İdrar Kaçırma Tedavisi  
Genital Bölge Renk Açma

**CO2**  
Cerrahi

Ben, Siğil ve Yaşlılık Lekesi Giderme  
Akut Akne Tedavileri  
Yumuşak Fibrom, Milia ve Siringoma Giderme  
Hemostaz, Koagülasyon, Ablasyon  
İnsizyon & Eksizyon


## FRX Fraksiyonel Başlık

**Finexel Fraksiyonel Modunun Nokta Boyutu 80 um'dir.**


Cilde minimum boyutta ve eşit enerji seviyesinde odaklı bir lazer ışını gönderir. Böylece hızlı bir iyileşme ve daha az ağrı deneyimlenmesini sağlayarak diğer teknolojilerden daha üstün bir optimal fraksiyonel lazer etkisi yaratır.

### 16 Farklı Tarama Özelliği


16 farklı tarama özelliği, yoğunluk ve boyut ayarı işlevleri, geniş bir tedavi yelpazesinde en iyi sonucu sağlar.

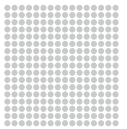


kare

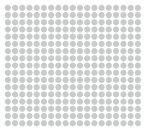


dikdörtgen

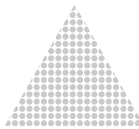


üçgen

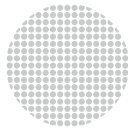


daire

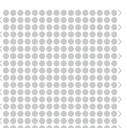


standart

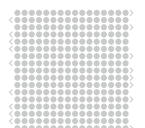

alternatif

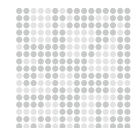

rastgele

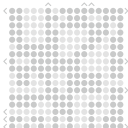

dağılım



Min. Size  
80 um

## Önerilen Parametreler için Güvenilir Önceden Ayarlanmış Program

Uzun vadeli klinik testler ile minimum yara izi riski, güvenli tedavi ve olağanüstü sonuçlar için parametre önerileri sunar ve sık kullandığınız tedavi parametrelerini kaydetmenize olanak sağlar.


Hafıza

1 2 3 4 5

Kaydet

## CO2 Cerrahi Başlık

Finexel'in olağanüstü yüksek azami gücü, güvenli ve etkili bir CO2 lazer tedavisi sunar.

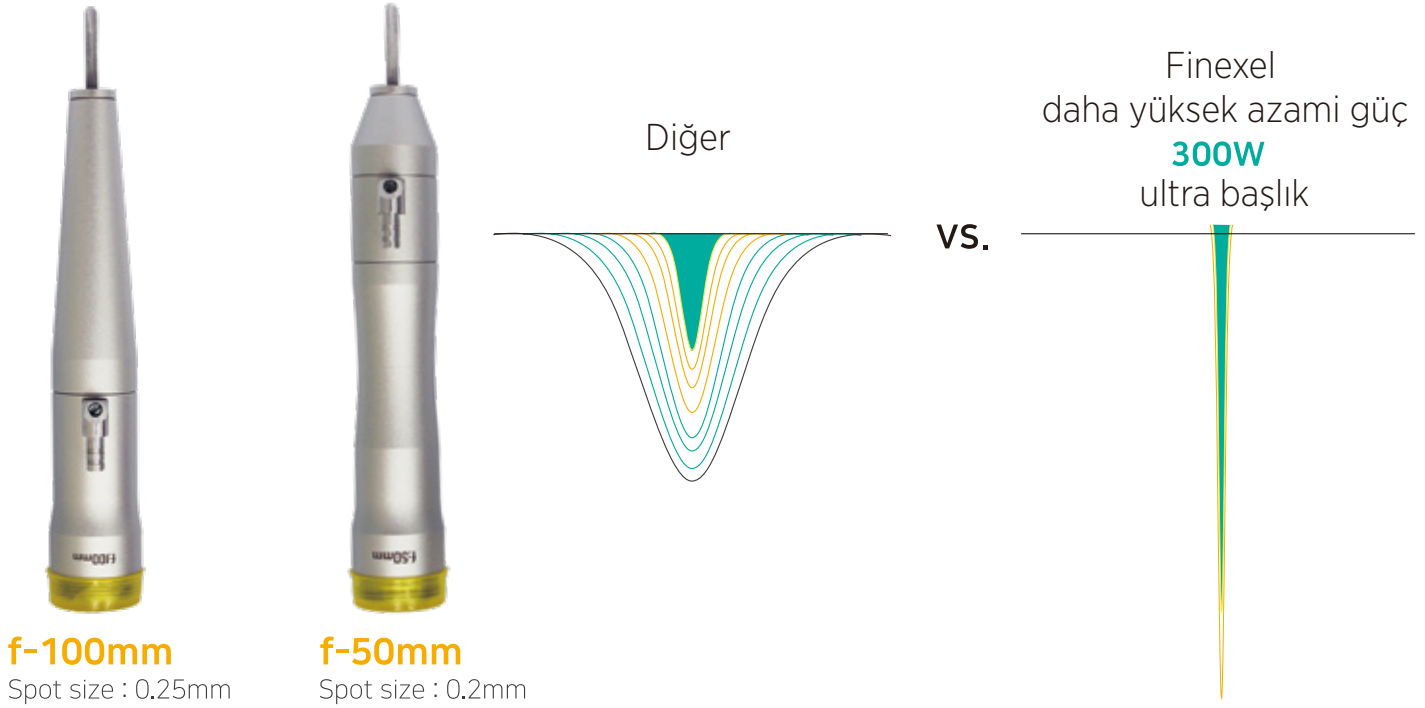


Finexel, Ultra Pulse modu ile 300W civarında yüksek azami güçte ışın verir. Bitişik dokulardaki termal hasarı en aza indirir, böylece ağrıyı azaltır ve hastalar daha hızlı iyileşir


# EVE Vajinal Başlık

## Tüm vajinal duvar tabakasının CO2 lazer ile termal stimülasyonu

Evero başlık seti

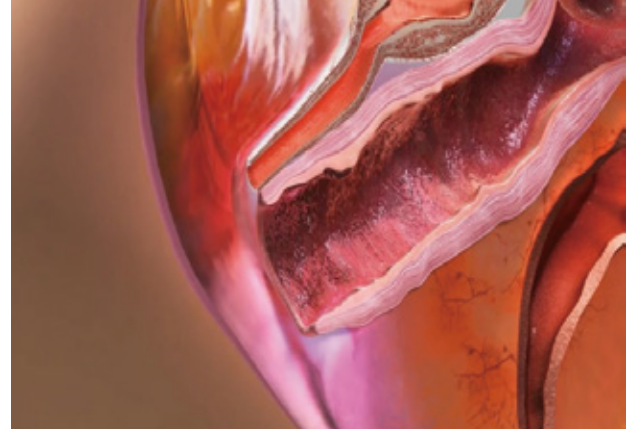

öncesi

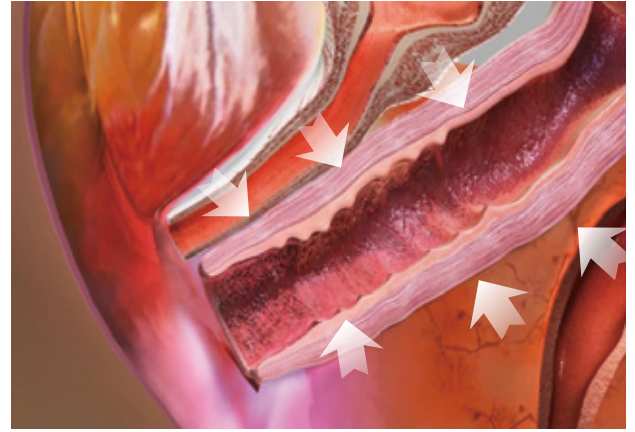


sonrası

Evero vajinal daraltmada tüm yönleriyle beklentilerinizi karşılar.

Tip	Ameliyat	Dolgu	Lazer
Yöntem	Kes ve Dik	Enjeksiyon	Emisyon
Süre	60 dakika	30 dakika	10-15 dakika
Ağrı Seviyesi	Yüksek	Orta	Yok
Etki	6 hafta sonra	2-3 hafta sonra	3-5 gün sonra
Dezavantaj	Mesane Kanama Lotunda Enjeksiyon Perforasyonu	Kısa Etkililik Süresi	Yok
Hastanede Yatış	1-2 hafta	Gerekli değil	Gerekli değil




Lazer tedavisi ile kolajen uyarımının etkisi.

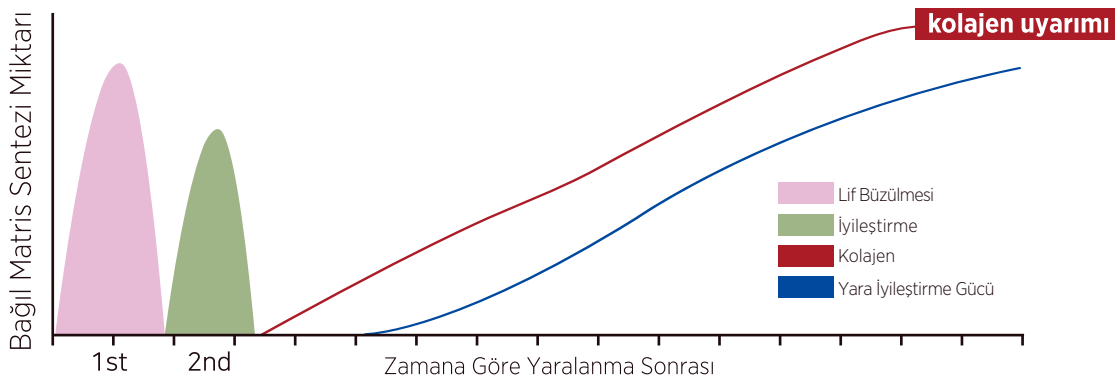

- Vajinal Tedavi
- Vajinal Kuruluk
- Cinsel Doyumuzluk
- Pelvik Organ Sarkması
- İdrar Tutamama




Öncesi

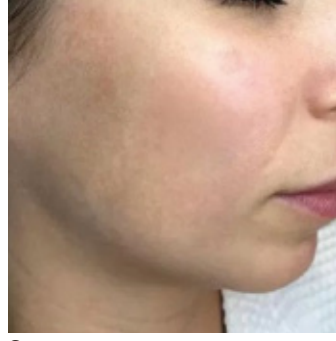

Sonrası



Öncesi

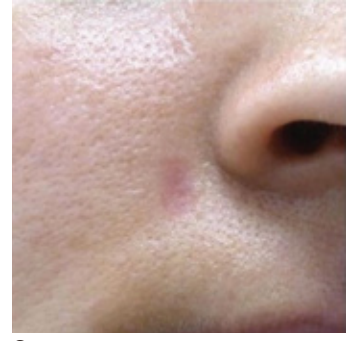

Sonrası



Öncesi



Sonrası



Öncesi



Sonrası

## Teknik Özellikler

<b>Dalga Boyu</b>	10,600nm
<b>Sistem</b>	Fraksiyonel CO2 Lazer
<b>Mod</b>	FRX(fraksiyonel) / CO2 (cerrahi) /Evero (vajinal)
<b>Maks Güç</b>	30W/40W
<b>Piksel Enerjisi</b>	5~300mJ
<b>Tarama Alanı</b>	1x1~20x20mm
<b>Yoğunluk</b>	0.1~2.0mm
<b>Üst üste gelme</b>	1~10
<b>Lazer şekli</b>	Kare-Dikdörtgen-Üçgen-Daire
<b>Işın deseni</b>	Standart-Alternatif-Rastgele-Dağılım
<b>Elektriksel</b>	100~240V, 50/60Hz
<b>Boyut</b>	350(W) x 400(L) x 1000(H) mm
<b>Ağırlık</b>	50kg (Max. Weight: 60kg)



#608, Ace-Techno Tower 2, Digital-ro 31-gil 19,  
Guro-gu, Seoul, Korea 08381

**Tel:** +82-2-866-9005 **Fax:** +82-70-8622-9009

**E-mail:** overseas@medicalsnoj.com

**Web:** www.medicalsnoj.com



Etiler Mah, Mürselpaşa Blv. No: 22/52 Konak/İzmir

**Tel:** 0 (232) 445 45 49 **Fax:** 0 (232) 448 48 02

**E-mail:** info@noramedikal.com.tr

**Web:** www.noramedikal.com.tr

SNJ Türkiye Distribütörü